

实验室清洗机 Laboratory Washer for Glassware | 半自动、台式

AW47

Made in
Japan

容器数量	450只 (试管16.5mL)	36个 (三角锥100mL) 16.5mL	清洗时间	0~60分可设定
------	-----------------	-----------------------	------	----------

台式、半自动实验室清洗机。




使用简单方便，可以一个房间配置1台的个人台式清洗机。

- 只要设置时间，按下开关后即可自动运行的简易设备。
- 采用上下2个方向的强压喷射方式，以及回旋喷头无死角喷射，高漂洗效果的清洗设备（可使用洗涤剂）。
- 标配清洗水加热器，无需另外配备热水器及相应配管作业。
- 更换强力喷射框（选配），可以清洗较难清洗污渍。

操作面板



尺寸图 (mm)

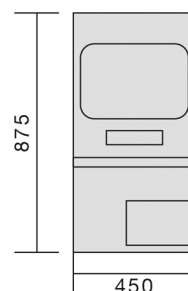

选购品



喷射框



试管框

规格

型号	AW47
清洗方式	上下2个方向压力喷射方式，喷嘴回旋式（可更换使用喷射框）
供水温度	室温~60℃
热水供水方式	加热器（内置：1kW）
供水压力	0.1~0.3MPa
容器架台	架台（标准）（清洗框选配）
供排水方法	供水：电磁阀开关 排水：自然落差排水
外装	钢板，表面耐药品性喷涂
内装	不锈钢钢板
外形尺寸	宽450×深490×高875mm
内槽尺寸	宽420×深450×高570mm
泵	AC100V 50/60Hz 200W
回转台	直径420mm
门	上下开闭式
重量	约43kg
电源（50/60Hz）	AC100V 15A
附属品	供水管（带结合器）2m 1根 排水管（内径25.4mm）1.5m 1根 塑料盖1个 专用洗涤剂（无磷）1kg、计量勺（50mL用）1个 供水口组件 1套

1 灭菌器

2 造粒干燥装置

3 马弗炉

4 恒温箱干燥箱

5 恒温培养箱

6 等离子装置

7 纯水制造装置

8 恒温水槽

9 恒温水循环

10 旋转蒸发仪

11 冷冻干燥冷阱

12 搅拌器振荡器

13 清洗机

14 选购品